




性能卓越的自动化电泳 服务于基因组研究

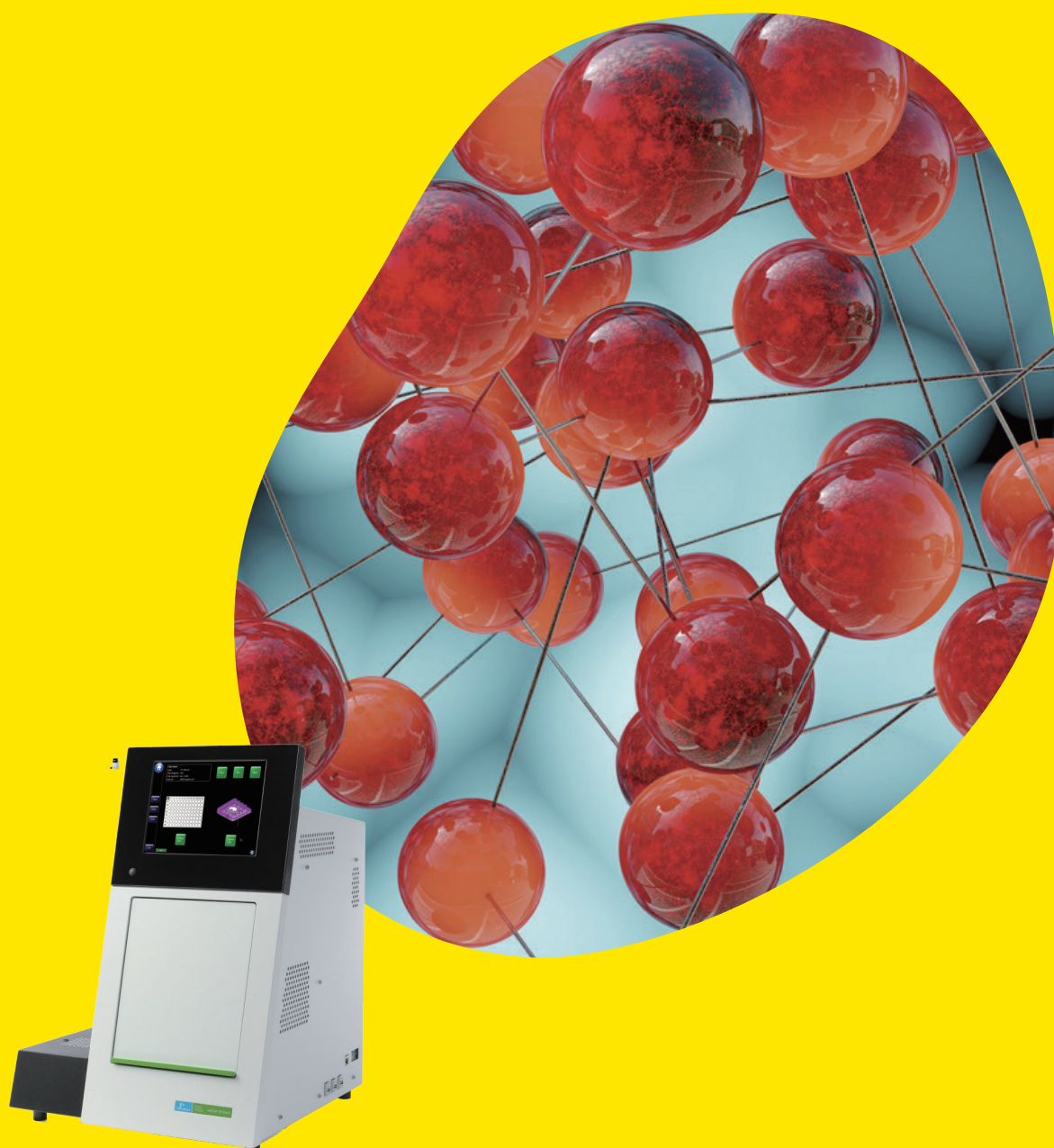

仅供研究使用。不用于临床诊断。

LabChip GX Touch

性能卓越的自动化电泳服务于基因组研究



图1. LabChip GX Touch

LabChip® GX Touch 微流体技术简化了平板电泳的诸多人工步骤，并提供对基因组研究，无论是 PCR 前还是 PCR 后的工作流程都至关重要的样品完整性及其他各项全面质控。

采用便捷的触摸屏界面，即使是临时用户都可很快上手，方便准备和运行样品。

LabChip GX Touch 提供：

- 触屏点击式快速样品分析—仅需 30 秒/样品
- 量化评价 RNA 和 DNA 样品完整性，确保只有优质的样品用于下游分析检测
- 最高批处理通量 24 个样品的高效平台节约时间和试剂用量；最高批处理通量 384 个样品的型号则适用于高通量工作流程
- 数据输出选项：电泳峰图、虚拟胶图或数据表格形式

无论您的测序实验室需要分析稀缺和珍贵样品，还是运行 PCR-free 的流程，亦或是需要对样品中的每个片段定量以进行基因分型分析，方便易用、成本低、通量高且灵活的 LabChip GX Touch 系列可以极大地减轻分析日益增多的样品的负担。

LabChip GX 触摸屏简化了样品的分析

Touch — 人性化操作

- 加载样品板和芯片
- 选择样品（一次最多运行 384 个样品）
- 选择实验类型
- 触点“运行”，开始实验
- 您甚至可以让系统自动将数据直接导出到您的网络或 LIMS 系统（图 2）

运行 — 实时观察运行

- 样品分析耗时至少 30 秒
- 数据采集过程中电泳峰图实时可见
- 在运行环境中将采集到的数据叠加比较样品谱式
- 挑选不同运行时间分析特征注释

回顾 — 实时查看数据或导出以待日后分析

- 选择以电泳峰图、虚拟胶图或数据表格形式显示（图 3）
- 使用 TIBCO Spotfire® 数据可视化软件强化分析结果
- 收集选择多板样品的数据进行平行分析比对
- 挑选过滤具备关键属性应用的数据
- 突出显示目标峰谱

LabChip GX Touch 软件能够通过少量设置来进行实验。实验设置参数文件可下载到仪器上，并通过触摸按键执行。自动保留最近一次实验运行的参数，以方便以相同的实验参数继续运行多批样品。

数据查看软件模块可帮助科学家从远离实验室的工作区查看已完成的样品。软件的使用许可证无数量限制，同事之间可共享数据，使得项目合作变得简单而直接。

LabChip GX Touch 数据文件可与 TIBCO Spotfire 兼容（可选功能）。



图2. 数据分析从一个易于使用的触摸屏界面开始



图3. 灵活的数据选项允许多种格式的实时查看或导出

只将高质量的核酸样品送到下游

电泳分析是二代测序文库质控的重要环节，它可同时提供每个样品的片段大小以及定量信息。LabChip GX Touch 自动完成 DNA 和 RNA 片段以及 smear 样品的片段大小和浓度分析，用于测序的文库样品的质控。片段样品分析通常用于交叉检验片段化或者 PCR 步骤的效果。文库样品的 DNA 总量分析均一化步骤。

节约样品

减少分析时样品的消耗，是很多实验室考虑的重要因素。对于诸如染色体免疫共沉淀测序和 PCR-free 等方法制备的浓度非常低的文库样品，这一点至关重要。NGS 3K 试剂盒就是专为这类有特别高灵敏度要求的测序流程而开发的。LabChip 可以对浓度低至 2.5pg/μL 的 smear 以及 0.5pg/μL 的片段进行准确定量，实现对稀缺和珍贵样品的快速分析（图 4）。

快速分析 RNA

LabChip Touch 平台提供了易于理解的 RNA 浓度以及核糖体 RNA 的比例，与 RNA 质量评分共同用作完整性评价指标（图 5）。RNA 质量评分 (RQS) 是对样品的质量和完整性的量化评价，可预测下游基因表达实验（如芯片分析或实时 PCR 等）的成功几率。

除 RQS 值外，分析软件现在可以自动计算 DV200 值。这两个值可以导出，并用于确定来自诸如 FFPE 标本的 RNA 样品的质量。经验证，RQS 与 Agilent® RIN（RNA 完整性指数）密切相关并遵循相同的 0-10 量化评级。

基因组 DNA 样品降解评分

为 LabChip GX Touch 系统开发的基因组 DNA 实验创新性的引入了基因组 DNA 质量评分 (GQS)，替代传统的凝胶电泳。所提供的电子数据，兼容实验室信息管理系统、可以轻松归档和分发。可在 30 - 60 秒内快速分析 25 - 12000bp 的 DNA 样品（对于 gDNA 完整性检测上限可达 40000 bp）（图 6）。

Small RNA 分析

LabChip® 小 RNA 试剂盒能够快速分离和测定多种片段范围在 20 至 150 核苷酸 (nt) 之间的小 RNA 样品，包括 miRNA、siRNA、piRNA、tRNA 以及 CRISPR-gRNA。这个全新的小 RNA 分析方法可快速自动分析小 RNA 片段大小和相对丰度从而达到节省时间和成本。LabChip® 微流控毛细管电泳技术能够在 1 分钟内自动分离和分析小 RNA 样品。系统软件自动分析数据，通过采用内部参考品和标准品来确定小 RNA 样品的片段大小和浓度（图 7）。

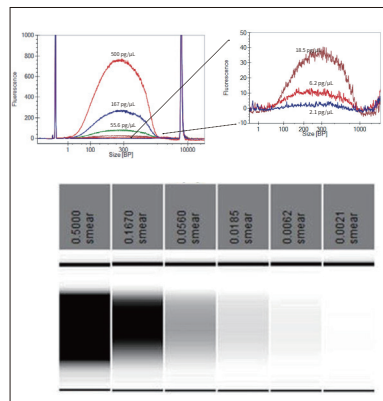


图4. 上图显示了 DNA NGS 3K 检测样品的灵敏度。同一 NGS 文库样品进行 6 次 3 倍系列稀释，实验结果展示了 LabChip DNA NGS 3K 检测样品浓度下限。数据结果在 LabChip GX Touch 仪器上展示。

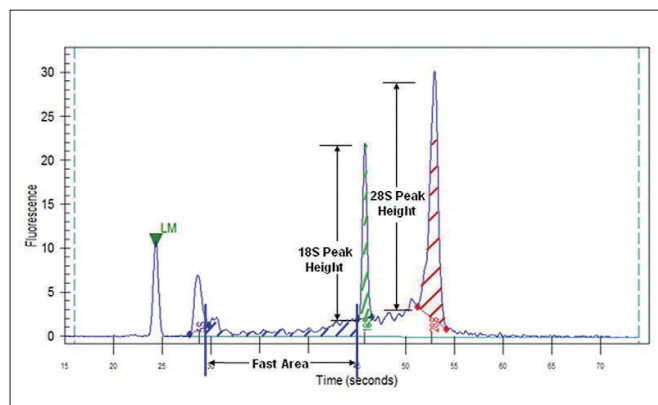


图5. RNA 电泳图谱，其中展示 18S 和 28S 峰

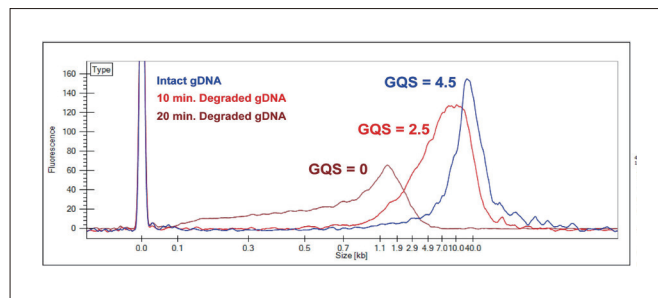


图6. 以电泳图谱展示的基因组 DNA 质量评估

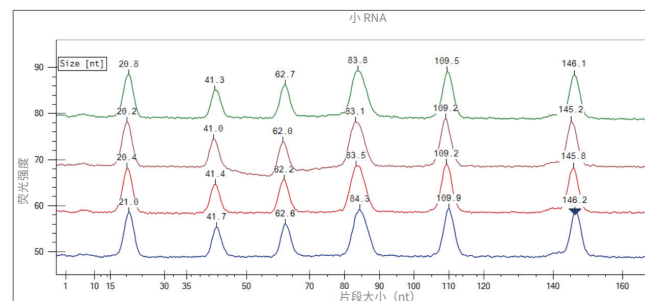


图7. LabChip®小RNA检测方法可自动测定小RNA样本的片段大小，具有很高的准确度和精密度。

Labchip 电泳

工作原理

LabChip 电泳在小型微流体芯片上进行（图 8）。将芯片装载入 LabChip GX Touch 系统后，芯片孔与铂电极接触，由铂电极提供电压和电流控制。系统机械臂将微孔板上的样品孔直接移动到芯片的毛细管“吸管”下方，约 150 nL 样品被抽吸到芯片上。待分析样品逐一被电泳分离，样品条带被激光诱导荧光检测。通过 ladder 及内标确定各条带的大小和浓度。



图 8. Labchip 电泳工作原理

LabChip GX Touch 试剂规格

试剂盒	片段大小与浓度范围
DNA 1K	25 bp – 1000 bp, 0.1 ng/μL – 50 ng/μL (片段)
DNA 5K	50 bp- 5000 bp, 0.25 ng/μL – 50 ng/μL (片段)
DNA 12K	100 bp- 12,000 bp, 0.25 ng/μL – 50 ng/μL (片段)
DNA HiSens	50 bp- 5000 bp, 10 pg/μL – 500 pg/μL (片段), 100 pg/μL – 5 ng/uL (Smear)
NGS 3K	50 bp- 3000 bp, 5pg/μL-500pg/μL(片段), 50pg/μL-5000pg/μL(Smear)
gDNA	50 bp - 40,000 bp, 0.2 ng/μL – 5 ng/μL (总浓度)
cf DNA	50-800bp, 50-1000pg/μL(总浓度)
RNA	100 – 6,000 nt, 25 ng/μL – 250 ng/μL (总浓度)
Pico RNALabChip	100 – 6,000 nt, 500 pg/μL – 5 ng/μL (总浓度)
Small RNA	20-150nt, 100 –10,000 pg/μL (总浓度)

订购信息

试剂名称	LabChip GX Touch HT	LabChip GX Touch 24
LabChip DNA Extended Range	760517	CLS138948
DNA 1K 试剂盒	CLS760673	CLS760673
DNA 12K 试剂盒	760569	760569
DNA 高灵敏度试剂盒	CSL760672	CLS760672
基因组 DNA 试剂盒	CLS760685	CLS760685
DNA 5K / RNA / Small RNA/CZE LabChip	760435	CLS138949
DNA 5K / RNA LabChip (4 芯片经济装)	760527	不适用
DNA 5K 试剂盒	CLS760675	CLS760675
标准级 RNA 试剂盒	CLS960010	CLS960010
皮克级 RNA 试剂盒	CLS960012	CLS960012
X-Mark LabChip	CLS144006	CLS145331
NGS 3K 试剂盒	CLS960013	CLS960013
Small RNA 试剂盒	CLS153530	CLS153530
cf DNA 芯片	CLS144006	CLS145331
cf DNA 试剂盒	CLS157242	CLS157242

产品	货号
Labchip GX Touch 24	CLS138162
Labchip GX Touch HT	CLS137031



Revvity 瑞孚迪官方微信



瑞孚迪生命科学

欲了解更多信息

请扫描二维码关注我们的微信公众账号

瑞孚迪生物医学（上海）有限公司

上海(中国总部) | Shanghai (China Head Office)

地址：上海市浦东新区张江高科技园区张衡路
1670 号
电话：021-6064 5888
传真：021-6064 5959
邮编：201203
客服电话：400 096 9018 | 800 969 018

西安 | Xi'an

地址：陕西省西安市碑林区雁塔北路 9 号中铁
第壹国际 2 层
电话：029-87962290
传真：029-8247 0898
邮编：710054

香港 | Hong Kong

地址：香港九龙观塘海源道 61 号万信中心
1803 室
电话：852-2620 1881
传真：852-2620 1238

北京 | Beijing

地址：北京市朝阳区北辰东路 8 号北辰时代
大厦 27 楼 2705~2707 单元
电话：400 096 9018 | 800 969 018
传真：010-8434 8988
邮编：100015

太仓 | Taicang

地址：江苏省太仓市太平北路 115 号
电话：0512-5337 8788
邮编：215400

成都 | Chengdu

地址：四川省成都市高新区和民街 366 号生
物医药创新孵化园 8 号楼(E8 栋)2 层、3 层
电话：028-6228 5666
传真：028-6228 5667
邮编：610095

revvity

版权所有©2023 Revvity 保留所有权利。

本资料中的信息、说明和技术指标如有变更，恕不另行通知。

500117_CHN_01