

Thermo Scientific microPHAZIR™ Rx 手持式近红外光谱仪



microPHAZIR™ Rx

是全世界首款手持式近红外分析设备 (NIR)，专为制药原料的现场鉴定设计。电池供电的 microPHAZIR™ Rx 不足 1.3 公斤，提供方便的便携式鉴定。

对于日益严格的原料检验要求 (100% 全检)，microPHAZIR™ Rx 为制药企业提供了一种全新的解决方案以提高产品品质，同时降低生产成本。Thermo 将近红外技术从实验室带到了仓库和生产车间，最大程度的降低了检测的费用，保证了产品品质，同时提高了检测的效率，并降低了供应链出错的风险。

我们的服务网络遍及世界 6 大洲的 50 个国家。经验丰富的服务团队为用户提供周全的技术服务。

应用：


- 来料的鉴定
- 质量控制
- 假药的甄别
- 过程控制
- 生产过程的问题排查
- 多组分定量分析



产品介绍

原料的鉴定

microPHAZIR™ Rx 是原料检验的理想工具，大大提高了原料检验的效率。其手持式的特性使得操作人员可以在仓库对原料直接进行鉴定，省去了传统检测需要的时间、人力、样品和耗材。

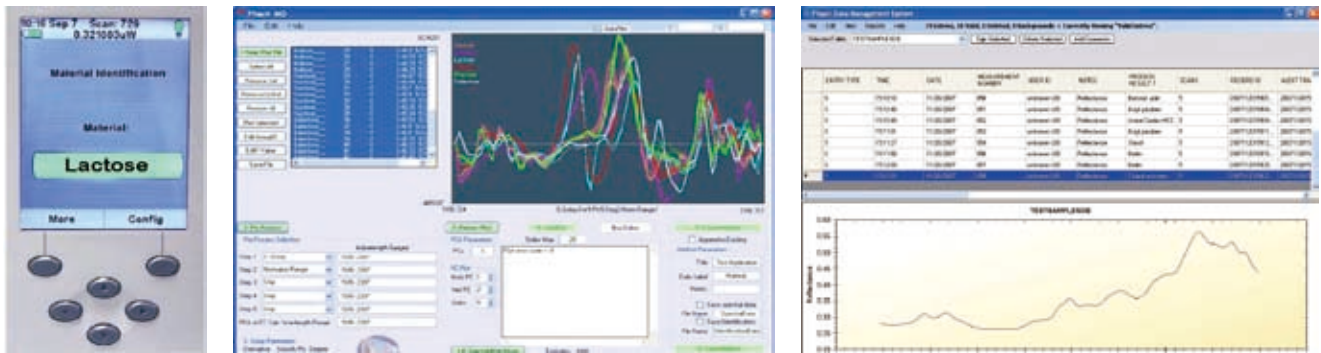

主要特点

- 轻便、耐用的便携式解决方案
- 重量不到 1.3 公斤
- 直观的彩色液晶显示屏
- 可充电电池
- 长时间的电池使用时间
- 操作简单，无需任何检测经验
- 只需少量培训
- 实时分析（只需 1-2 秒）
- 无损检测
- 数据自动保存
- 可通过电脑进行控制
- 内置的数据库包含超过 100 种的常用原料
- 内置条码阅读器

Thermo Scientific microPHAZIR™ Rx

| 技术参数 | |
|------|---|
| 工作原理 | 近红外光谱无损化学分析 |
| 采样模式 | 漫反射，可选液体样品适配器 |
| 重量 | 1.3kg |
| 光源 | 卤钨灯，对人和样品安全 |
| 测量时间 | 小于 3 秒 |
| 数据下载 | 通过 USB 与电脑进行数据和应用同步 |
| 电池 | 可更换，可充电锂电池组大于 5 小时 交流充电器，电池充电时间小于 2 小时 标配 2 套电池 |
| 校正 | 工厂内用可溯源的光度和波长标准物按 Thermo 严格标准和 USP1119 协议检测 |
| 规范 | IQ/OQ/PQ |

赛默飞世尔科技

Thermo Fisher Scientific

北京
北京安定门东大街 28 号
雍和大厦西楼 7 层 702-715 室
邮编：100007

上海
上海浦东新区新金桥路
27 号 6 号楼
邮编：201206

广州
广州市东风中路 410-412 号
健力宝大厦 3003-3004
邮编：510030



ThermoFisher 授权代理商
上海玮驰仪器有限公司
总公司：上海市浦东新区环科路 999 弄浦东国际人才港 13 号楼 2 楼
400-820-3556 | Marketing@weichilab.com
分公司：江苏省苏州市工业园区新平街 388 号 21 幢 5 层 08 单元
0512-65107980 | Marketing@weichilab.com

Thermo
SCIENTIFIC