


ArchiPure 96 全自动核酸提取纯化仪

Automatic Nucleic Acid Extraction Instrument

★ 产品介绍:

ArchiPure 96是一款操作简单、高通量、稳定高效的全自动核酸提取纯化仪，采用磁珠分离技术，选择相应的试剂盒就可以自动地从多种样品材料如血液、组织、细胞中分离纯化高纯度的核酸。整个仪器结构设计精巧，透明的工作腔便于观察工作情况；大屏幕液晶面板，美观大方，操作简单；完善的保护功能，使用安全，更可靠。

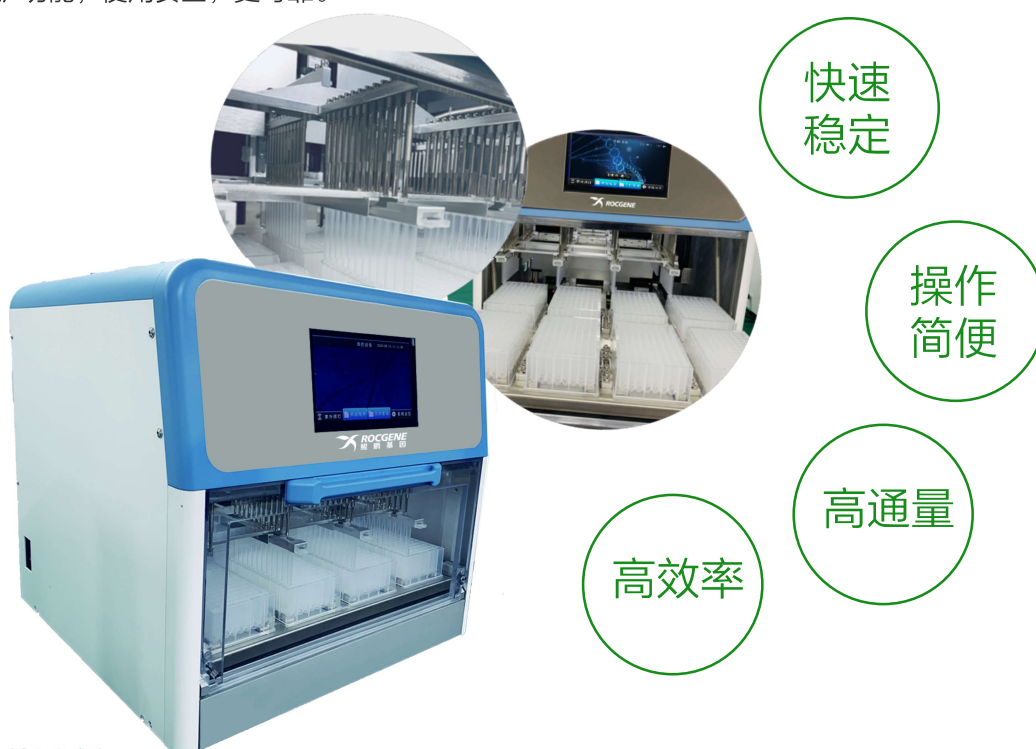

★ 推荐试剂:

产品名称	货号
ArchiPure通用型磁珠法病毒RNA快速提取试剂盒	RGP-261001-48
ArchiPure通用型磁珠法病毒DNA/RNA快速提取试剂盒	RGP-261002-48
ArchiPure磁珠法细菌基因组DNA提取试剂盒	RGP-261003-48
ArchiPure磁珠法全血基因组DNA提取试剂盒	RGP-261004-48
<i>更多配套试剂请参考ArchiPure综合彩页</i>	

产品技术参数	
仪器	ArchiPure 96
样本通量	1-96个样本
处理时间	15-60 min
液体处理体积	20-1000 μ L
洗脱体积	30-100 μ L
孔间差异	CV < 3%
加热温度范围	室温-100 $^{\circ}$ C
振动混合模式	多档可调振动速度, 溶液体积自适应振动幅度
污染控制	UV灯, 内置紫外消毒模块
操控模式	通过10寸触摸屏操作, 无需外接平板电脑
接口方式	USB, TF卡
尺寸 (宽 \times 深 \times 高)	472 \times 455 \times 470 mm (L \times W \times H)
重量	45 kg
电源	AC 110-240 V, 50 Hz/60 Hz
配套程序	内置多个程序, 可新建、删除、编辑模式程序, 无需人为优化和编程, 配套程序免费升级
配套耗材	96孔深孔板+12联磁棒套 & 配套试剂盒
配套试剂	原厂试剂盒提供96孔板预装试剂盒



鲲鹏基因(北京)科技有限责任公司

Rocgene Technology Limited.

地址: 北京市昌平区回龙观龙域北街10号创集合(北京)产业园429室

邮编: 102208



鲲鹏授权代理商

上海玮驰仪器有限公司

总公司: 上海市浦东新区环科路999弄浦东国际人才港13号楼2楼

400-820-3556 | Marketing@weichilab.com

分公司: 江苏省苏州市工业园区新平街388号21幢5层08单元

0512-65107980 | Marketing@weichilab.com