

Gentle P-Pac

高通量分装系统




全密闭自动化

精准可靠高通量

符合法规要求

Overview

产品概述

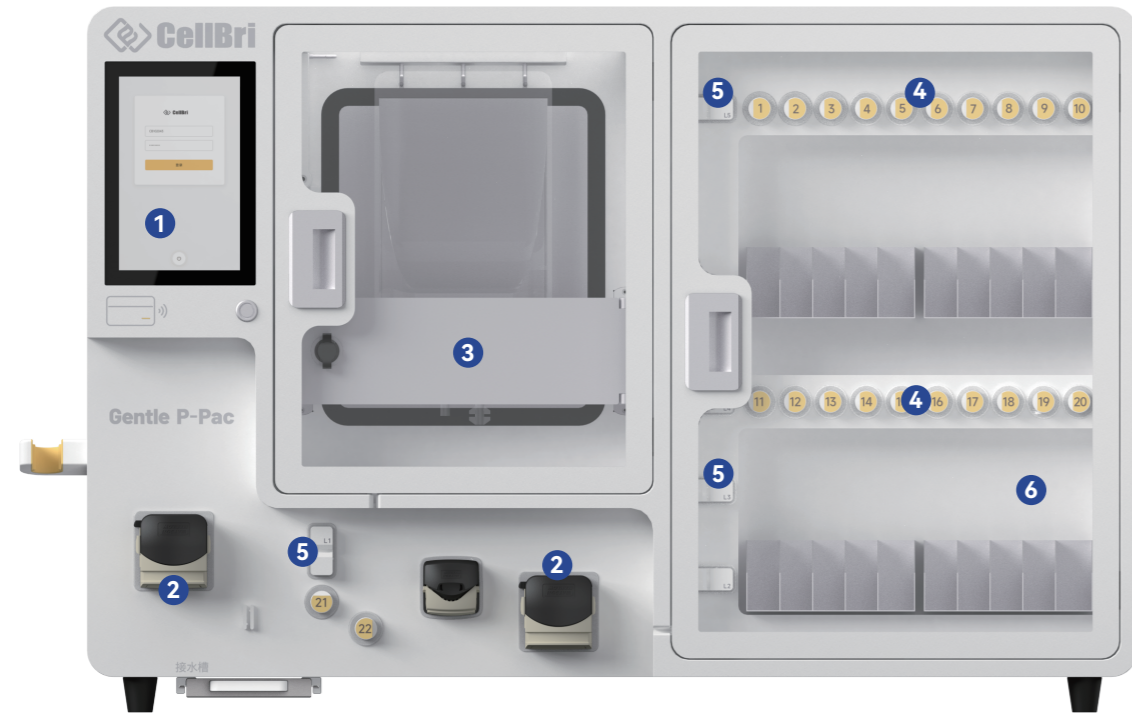

Gentle P-Pac高通量分装系统

尺寸: 1184mm*480mm*795mm

① 触摸显示屏

② 蠕动泵

③ 温控及混匀单元


④ 夹管阀

⑤ 气泡传感器

⑥ 分装单元

全密闭自动化


工艺流程

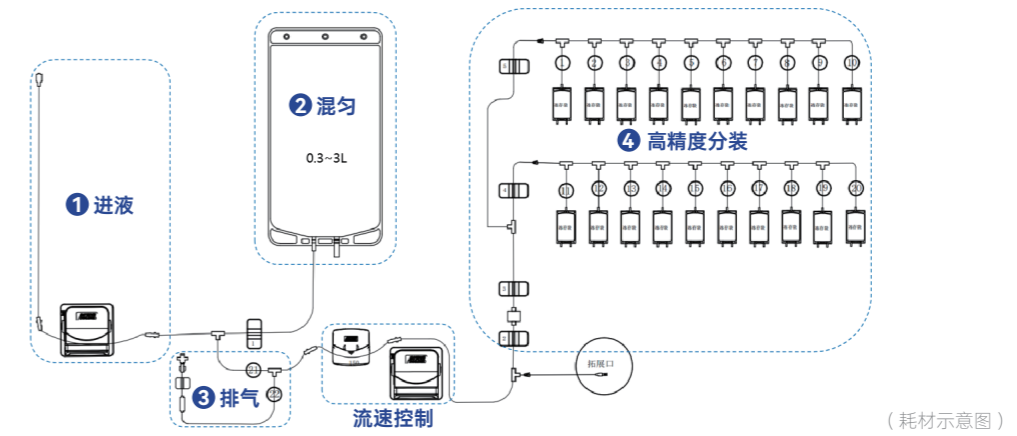

精准可靠高通量

- 分装体积2mL-500mL
- 可一次性完成20袋液体分装
- 温度误差 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 以内
- 分装体积误差小于2%, 密度误差小于5%
- 维持大于95%初始细胞的活性

分装体积	100mL	50mL	10mL	2mL
平均值(n=10)	101.4mL	50.7mL	10.4mL	2.2mL
平均密度误差	3.5%			
平均细胞活率	98.6%			

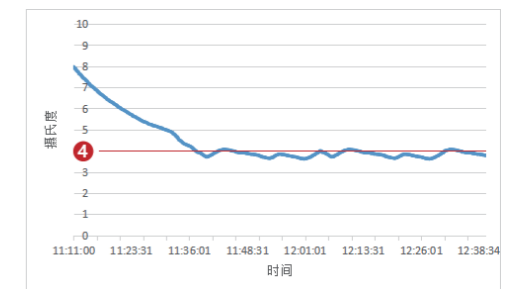

符合法规要求

软件设计符合21 CFR part 11

✓ 用户权限

✓ 审计追踪

✓ 电子报告

开拓创新 · 质量放心 · 服务贴心

深圳赛桥生物创新技术有限公司

📍 深圳市光明区凤凰街道恒泰裕大厦3栋A座401室

☎ 0755-27106806

✉ marketing@cellbri.com



赛桥生物官方公众号