


CRF 67

主要特点:

- 控制器使用基于Windows操作系统，操作便捷稳定
- 程序数量无上限
- 多色彩区分显示样品温度，箱体温度和目标温度等多组别的温度显示
- 温度设置可由样品或箱体温度来分别进行设置
- 程序与数据存储于硬盘或磁盘中
- 操作软件有密码保护
- 降温程序的历史数据库可检索
- 降温程序图谱和数据可经由任何USB接口打印机进行打印
- 每个降温程序最多可以设置多达30个数据段
- 运行期间，连续数字和图像显示时间和温度
- 所有运行功能均设有手动越控装置
- 可设置温度范围: +50 °C 至 -180 °C
- 可设置降温速度: 0.01°C/分钟 至 99.9°C/分钟
- 程序温度保持时间: 1秒 至 99小时
- 6个预设值的降温程序

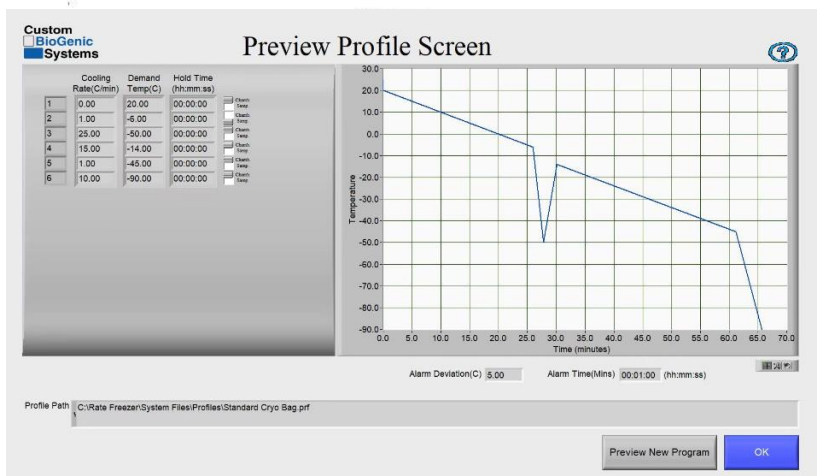

标准默认配置包含:

- 搭载2100系列软件的工业笔记本电脑控制器
- 降温箱体
- 适配用户不同样品规格的可选冻存架
- 液氮传输管路（1.2米软管）

主要技术规格:

箱体参数:

- 电源要求:
120 伏, 50/60 Hz, 10 安, 或
230 伏, 50/60 Hz, 10 安
- 外部尺寸:
深: 781 mm
高: 787 mm
宽: 495 mm
- 内部尺寸:
深: 381 mm
高: 406 mm
宽: 406 mm
内部容积: 67 升




部分操作屏和编程屏示例



主菜单和可选所有功能页



运行页面提供了所有的具体降温程序的设置和告警和限位控制细节

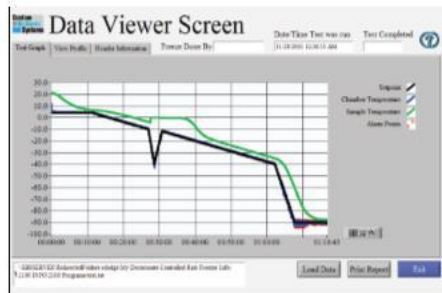

包含潜热点的降温数据图表

附件:



深地温手套



液氮传输软管



冻存架 (适配冻存瓶)



2ml 冻存瓶
(最大容量- 2166 瓶)



"T"型阀组件



冻存袋压力架



冻存架 (适配冻存袋)



10 ml/20ml 冻存瓶
(最大容量- 864/726 瓶)



样品温度探头

50ml 冻存袋
(最大容量- 126 袋)