

# Agile Trans™

Automatic Liquid Transfer Instrument

## 自动转液仪

实现自动化全封闭不同容器  
之间液体转移

 快速准确

 灵活适配

 自动转液



# Overview

## 产品概述

Agile Trans 自动转液仪可实现不同容器间自动液体转液，可兼容袋装 / 瓶装试剂，培养瓶液体的转移，速度快通量高，并可放置于超净工作台中使用。



## 主要特点



### 快速准确

300mL/min快速液体转移，体积误差8%以内




### 灵活适配

可兼容多种瓶装/袋装液体转移，体积小可放置于超净台内




### 自动转液

体积与速度自主设定，达到目标体积后自动停止，过程中可随时暂停

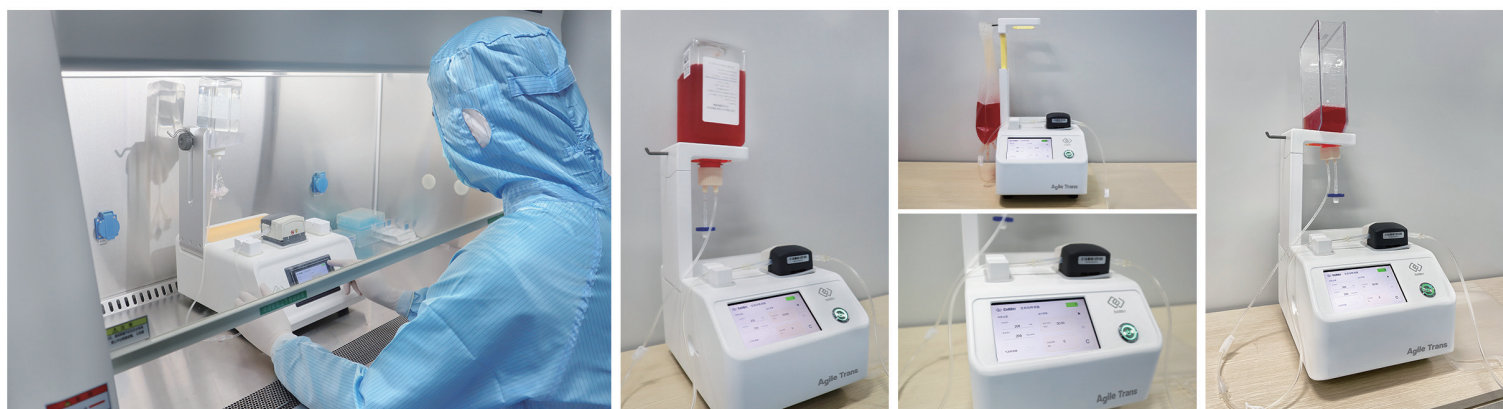

## 转液仪耗材

产品编码	产品名称	型号规格/描述
01020061	一次性转液管	PJ-015, 管路2端闭合盲端, 适用于无菌接管
01020064	一次性转液管	PJ-016, 管路一端鲁尔公接口, 一端鲁尔母接口
01020065	一次性转液管	PJ-017, 管路一端带穿刺接头, 一端为闭合盲端
01020066	一次性瓶-袋转移套件	PJ-018, 适用于瓶装培养基、Ficoll分离液及同类型瓶盖, 配鲁尔公接口
01020067	一次性瓶-袋转移套件	PJ-019, 适用于T175和T225培养瓶盖, 配鲁尔公接口

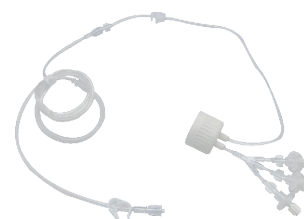

# 产品规格

Product Specifications

## 规格参数

体积	220W × 300D × 210H mm <sup>3</sup>
重量	12.5kg

## 功耗参数

电源要求	110-240 VAC, 50/60 Hz
功率	蓄电池加稳压器提供24V稳压供电

## 端口参数

DC-022*2.1mm	直流电源插口（供电池充电使用）
--------------	-----------------

## 主体参数

显示器	5寸电容触摸屏
传感器	液体传感器
挂钩	1个
液体输送设备	夹管阀、蠕动泵，泵速率为0-300mL/min
管路耗材	一次性全封闭耗材

## 深圳赛桥生物创新技术有限公司

📍 深圳市光明区凤凰街道恒泰裕大厦3栋A座2-6层

☎ 0755-27106806

✉ marketing@cellbri.com



赛桥生物官方公众号