


# Agile Solder

— 无菌接管机 —

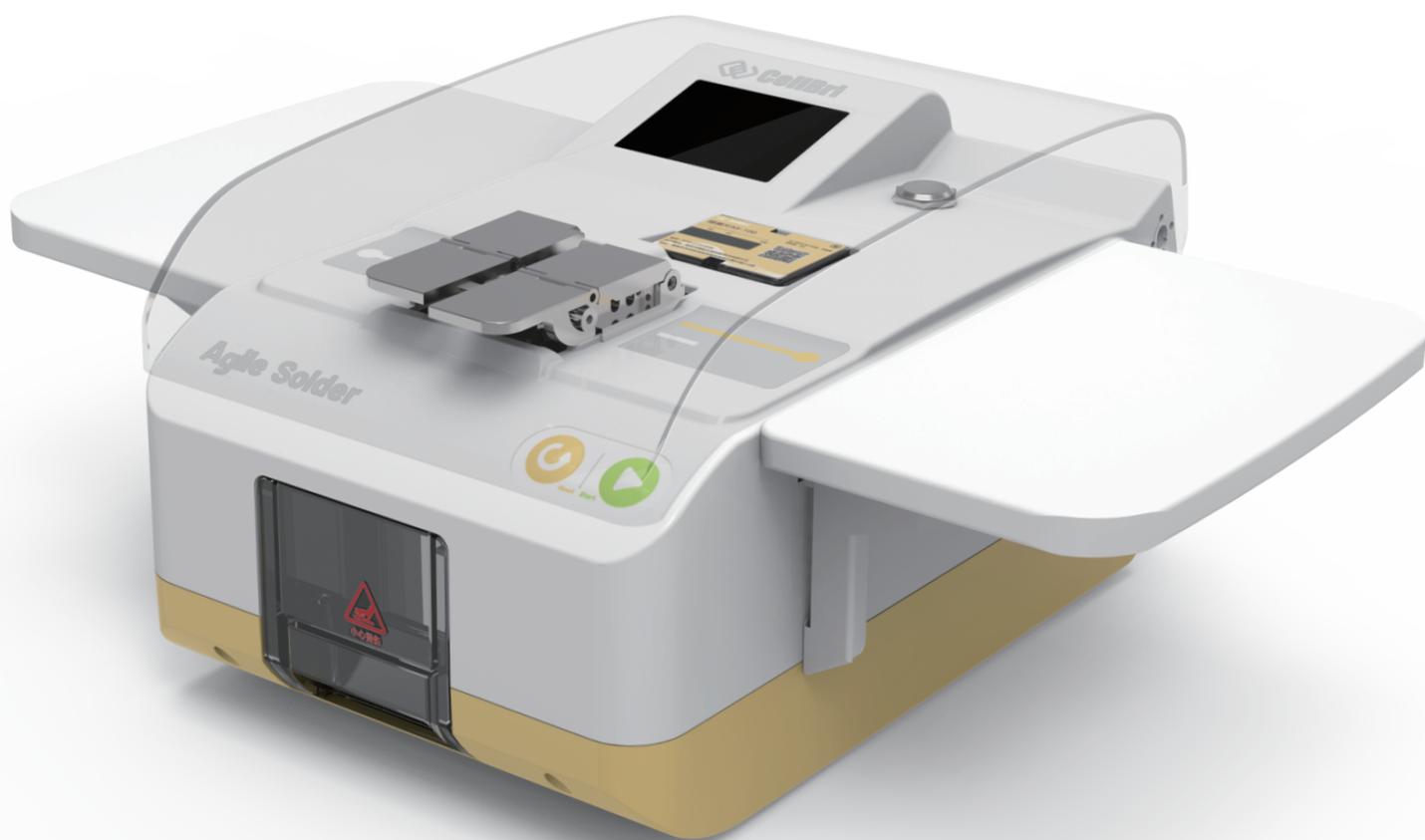

深圳赛桥生物创新技术有限公司

☎ 0755-27106806

✉ [marketing@cellbri.com](mailto:marketing@cellbri.com)


🌐 [www.cellbri.com](http://www.cellbri.com)

📍 深圳市光明区凤凰街道恒泰裕大厦3栋3A座2-6层



# Overview

## 产品概述

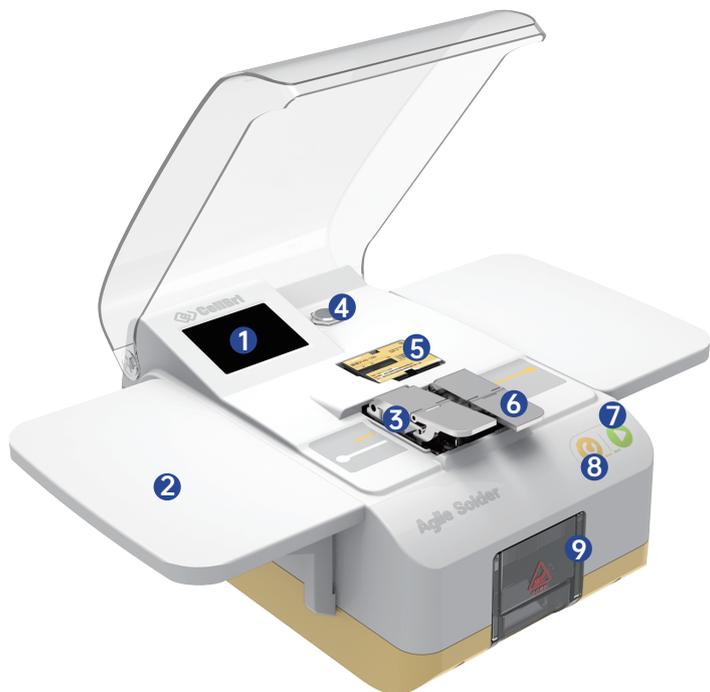


### Agile Solder

无菌接管机采用熔接片在高温状态下切割导管并再接通的方式连接二根管路，在切割和接合过程中保持无菌状态，并且不会在管内形成微粒或化学残留物。

- ① 显示屏
- ② 血袋支架
- ③ 导管槽
- ④ 熔接片退盒按钮
- ⑤ 熔接片盒
- ⑥ 导管压板
- ⑦ 启动键
- ⑧ 复位键
- ⑨ 废片盒



连接湿-湿、干-干、  
湿-干组合的管路

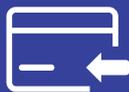

自动更换熔接片



可拆卸血袋支架



中文操作提示

## 产品规格

Product Specifications

管子材料：聚氯乙烯（PVC）

熔接片：型号：AS-100，每盒100片

电源：电压220V，输出功率200VA：

重量：6Kg

管子尺寸：外径：3.9-5.1mm；内径：2.3-4.1mm

操作条件：使用温度5°C~40°C；相对湿度：≤80%

外型尺寸：W330\*D210（467）\*H182mm<sup>3</sup>