



CryoPak

生物样本深低温转运桶


CryoPak



专为液氮罐中
保存的样本转移而设计

可自由进出
基点自动化液氮存储系统和
深低温挑管系统取送样本

避免样本升温损伤

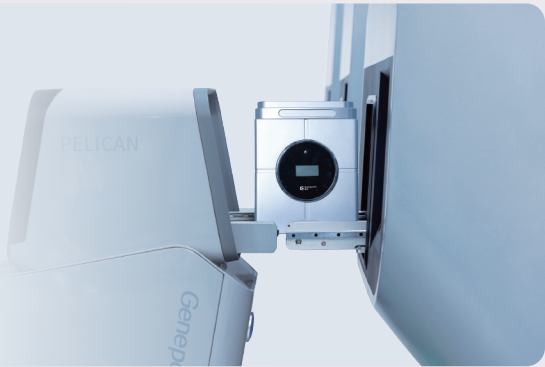

配备温度探头及LED显示屏
可实时测量和显示
腔体内温度



具有温度校准及
超温报警功能

底部加注3L液氮
可维持-150°C以下
气相深低温环境
长达18小时

设备型号规格表

型号	CP-CB / CP-SBS
支持冻存盒类型	2英寸方形 / SBS格式冻存盒
样本容量	冻存盒数量: 1; 冻存管数量: 1-196
屏幕类型	LED
静态液氮消耗	≤0.15L/h
额定液氮加注量	3L
静态保持时间	-150°C以下 ≥18小时
开盖温度维持时间	-150°C以下 不少于2小时
尺寸	W260mm x D280mm x H330mm
空重	6.85kg



微信公众号



官方网站

详情请拨打服务热线: 400-606-8780 或登录 www.genepoint.com

本产品仅可用于工业或者科研等非医疗目的, 不得直接或间接将产品用于临床诊断或其他未经许可的临床医疗用途。